

pH Auto Calibration Machine



自動校正設備

簡單、安全、方便、流程標準化的新選擇




- ✓ 無人值守
- ✓ 標準化流程
- ✓ Memosens感應式連接
- ✓ 完全清洗及乾燥
- ✓ 一鍵完成藥劑更換
- ✓ 一眼辨識設備當前狀態

全自動化流程 無人值守




✓ 標準化流程

酸洗>活化>清洗>校正>儲存
一次到位，標準化且不須人員守候

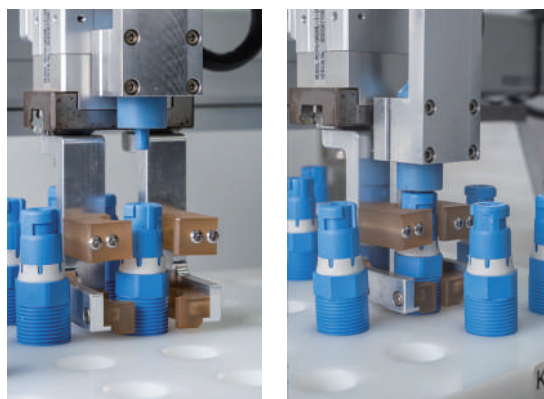

✓ Memosens感應式連接

儲存校正紀錄、無金屬裸露,感應式連接並且傳輸不受環境影響

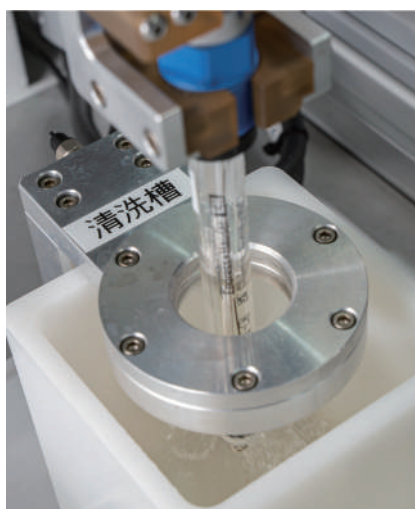

✓ 灑水及吹掃功能

去除沖洗後的殘留水溶液和水，輕鬆取得正確可靠的校正數據



✓ 一鍵完成換液

自動抽換緩衝液、清洗液、水及保存溶液，使用溶液始終保持新鮮乾淨

自動校正設備 規格

| | |
|------|-----------------|
| 運作方式 | 機械手臂夾取 |
| 適用電極 | Memosens pH電極 |
| 批次數量 | 20支pH電極 |
| 槽體設計 | 3槽設計 (酸洗、清水、活化) |
| 批次數量 | 20支pH電極 |
| 校正點數 | 2點校正 |



擎傑企業有限公司

A : 台北市松山區10512敦化北路167號3樓B區
T : (02)2718-3938 | F : (02)2713-4190



KINGJARL
擎|傑|企|業